
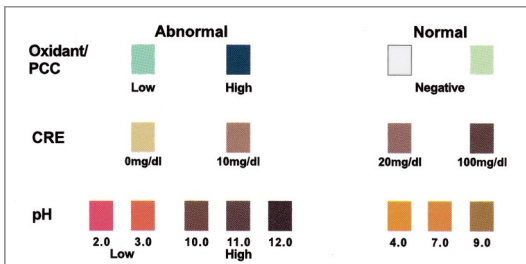



1. Tag testen ud af forpakningen. Vær opmærksom på at testen har stuetemperatur og at holdbarhedsdatoen ikke er overskredet. Udfyld evt. feltet ID og dato. Fjern den aftagelige plastichætte.
2. Dyp halvdelen af teststrimlernes længde i urinen. Hold teststrimlerne nede indtil urinen begynder at sive op i alle felterne ovenfor. Tag testen op når urinen er nået til linien T i alle felter. Placér testpladen på et plant underlag.
3. Aflæs kreatinin, Oxidant og pH mod farveskemaet.

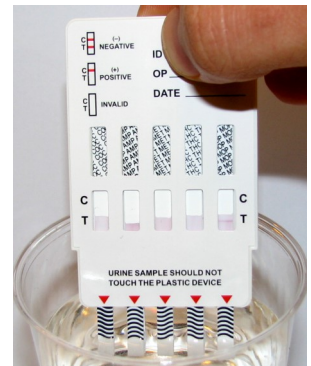

#### 4. Sådan aflæses testen:

Start aflæsningen efter 3 min. Hvis alle streger er fremkommet efter 3 min, kan aflæsningen afsluttes. Men hvis en eller flere streger ikke er fremkommet, vent da 10 min med at aflæse. Hvis der ikke er fremkommet teststreg(er) (T) efter 10 min er testen positiv. Aflæs ikke resultatet efter 10 minutter.

Inden en test aflæses, skal man sikre sig at kontrolstregen (C) er fremkommet, er den ikke synlig må testen ikke anvendes. Kontrolstregen viser, at testen er korrekt udført og at den rette mængde urin er tilført.

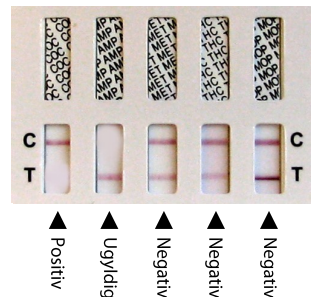

**Negativ:** både kontrolstreg (C) og teststreg (T) skal være synlig i aflæsningsfeltet (se billede)

**Positiv:** kun kontrolstregen (C) er synlig i aflæsningsfeltet (se billede)

Teststregene kan være mere eller mindre klare i forhold til hinanden. Nogle streger fremkommer hurtigere end andre. Mindste antydning af en teststreg skal tolkes som et negativt resultat.